

The Best

# 细胞冻存液

- 省时
- 省事
- 省力
- 省细胞



**AmyJet Scientific**  
艾美捷科技

# Bambanker™

## 完美的细胞冻存

### 1

### 无血清，广泛验证

Bambanker™是一种无血清冻存介质，可显著提高超过1,000种不同细胞系的解冻后存活率

### 2

### 最佳恢复活率

Bambanker™具有独特的化学配方，允许在-80°C下存储非常敏感的细胞，而不会导致细胞死亡或分化

### 3

### 直插液氮，告别程序降温冷冻

借助Bambanker™的保护特性，培养的细胞可以在不需要分步或程序冻结的情况下冷冻。这将使您的细胞存储过程更加简便

### 4

### 即用型

Bambanker™是一种即用型介质，简化了冻结细胞的操作

## 可能，有所不知？



> Bambanker™ 成功冷冻了1000多种不同细胞系

> 每年有100万个细胞样品，使用了Bambanker™ 冻存液

> Bambanker™ 有250篇同行评议的科学出版物可供参考



想要了解更多  
Bambanker™ 详细信息  
欢迎垂询，中国区代理  
艾美捷科技，400-6800-868



CONTACT US!




THE PERFECT  
CRYOPRESERVATION

### SUPERIOR RESULTS

Bambanker cryopreservation high post-thaw survival for commonly used cells but also for very demanding cells

## Cell Cryopreservation

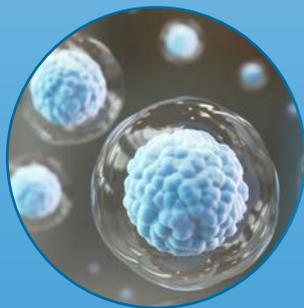

### 科学界认可

Bambanker™ 是许多科学家首选的冷冻介质。在Google学术中搜索Bambanker™，并查看方法部分，亲自了解。即使是最困难的细胞系也能成功地使用Bambanker™进行存储。



为每个细胞提供最佳的

# 冻存体验

## 科学家们怎么说？

关于 Bambanker™

“通过使用Bambanker冷冻介质，我们能够显著提高解冻后iPS细胞的存活率。我们对这个产品非常满意，现在我们将其用于所有干细胞培养。”

★★★★★

Dr. Sandra H. - Heidelberg University  
Heidelberg, Germany

## BAMBANKER™ 冻存液



### BAMBANKER™

适用于大多数细胞 (通用款)

细胞冻存液 Bambanker™ 允许在-80°C下对细胞进行冷冻保存，无需额外的昂贵超低温冰柜，避免耗时的冷冻流程。



### BAMBANKER™ HRM

人类干细胞专用

无异种成分的细胞冻存介质Bambanker™ hRM不含牛血清白蛋白，降低了自发细胞分化的风险。它改善了灵长类ES/iPS细胞的存储和存活能力，同时极大简化了流程。



### BAMBANKER™ DIRECT

杂交瘤细胞专用

Bambanker™ Direct省去了离心步骤。冷冻介质直接添加到细胞培养基中(1:1比例)，混合后在-80°C冷冻。这个程序非常适合对外部压力敏感的细胞。Bambanker™的所有其他优点对于Bambanker™ Direct同样适用。



### BAMBANKER™ DMSO-FREE

对DMSO敏感的细胞

DMSO可以避免冰晶的形成，但对特定细胞可能具有毒性并降低其存活率。Bambanker™ DMSO-Free具有独特的配方，可以防止冰晶的形成，而无需DMSO。这使得Bambanker™ DMSO-Free特别适用于对DMSO敏感的细胞系。

