



AmyJet Scientific
艾美捷科技

Minilys®



用于快速裂解样本的灵活研磨器

- 3D珠研磨技术的紧凑型研磨器
- 灵活易用: 兼容广泛的样本和参数
- 可用于获取 DNA/RNA, 蛋白质和小分子
- 最小的工作台空间

Bertin 中国区总代理, 艾美捷科技, 400-6800-868, www.amyjet.com



MINILYS®

灵活，高效，易用的组织研磨仪



Minilys是一款小巧又灵活的样品研磨器，完全满足样品制备实验室的需求。Minilys在效率与灵活性之间提供了最佳组合。独特的设计提供了绝佳的研磨、裂解和均质效率，以获得DNA/RNA、蛋白质和小分子。Minilys一次能够处理3个2mL/0.5mL或1个7mL的任何类型样品的处理。其用户友好的锁管系统使Minilys成为任何研究实验室的理想选择。


高效快速

Minilys提供与Precellys'24Touch和PrecellysEvolutionTouch相同的珠磨技术和研磨质量，是唯一一款使用3D运动裂解样本的小型研磨器。


安全易用

Minilys可确保轻松操作和安全操作。如果盖子在运行时没有关闭牢固或呈打开状态，其创新的切断系统会自动停止操作，从而为用户提供额外的安全保障。

使用步骤

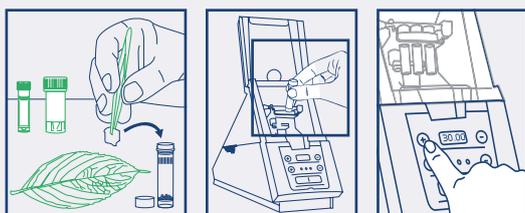

1. Prepare your biological samples in 0.5, 2ml or 7ml tubes
2. Load from one to three tubes
3. Set speed and time

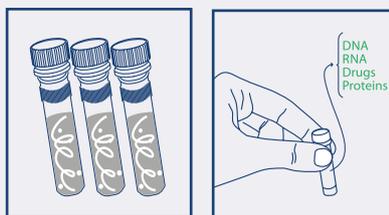

4. 3D beat-beating: same efficiency in each tube enables the liberation of cell components
5. In 30 seconds, your sample is ready for analysis!

Precellys 研磨仪系列产品



Precellys® Evolution Touch



Cryolys® Evolution



Precellys 24 Touch



Lysing kits consumables

应用范围



DNA/RNA提取

蛋白提取

代谢产物/药物提取

技术参数

容量	1-3个2mL/0.5mL研磨管 1-3个 1.5mL微量离心管 1个7mL研磨管
速度范围	3,000; 4,000 或者5,000rpm
循环次数	长至240s
尺寸	长: 180mm, 宽: 290mm, 高: 380mm
重量	7.8kg
规范	CE, FCC part 15
电源	90 - 250VAC / 50-60Hz power:1kVA
噪音	< 70dB
货号	P000673-MLYS0-A

