



食品安全

食物过敏原残留检测解决方案

可靠，方便，合规

食物过敏原检测和定量



400-6800-868

快速和简单的过敏原测试， 成就准确的食物标签

使用ELISA Systems食品过敏原检测试剂盒，确保符合食品产品的标签要求。全面的酶联免疫吸附试验（ELISA）旨在检测和量化食品和环境样品中特定蛋白质或残留物的存在。

- **快速**— 在60分钟内完成样品制备，实现快速测试
- **简单**— 即用型液体试剂和浓缩液，加上所有试剂盒的通用处理程序，使ELISA系统检测易于实施和运行
- **稳健**— 即用型液体质控品和无过敏原的非质控试剂意味着降低了可能导致假阳性结果的交叉污染风险
- **灵活**— 用于定性或定量检测：一个试剂盒可用于更多的应用
- **灵敏**— 检测低水平的蛋白质或蛋白质残留物（包括热稳定蛋白），以提高产品安全性的保证
- **支持**— 我们经验丰富的技术团队随时准备为您提供帮助


全面的食物过敏原检测方案

杏仁 	荞麦 	甲壳纲 
鸡蛋 	麸质 (麦醇溶蛋白) 	榛子 
羽扇豆 	牛奶 (酪蛋白、β-乳球蛋白和全脂奶的单独检测) 	芥菜籽 
花生 	芝麻 	大豆蛋白 


快速、简单的实验流程



向包被有抗体的孔中加入100ul 标准品和样品。在平面上轻轻振荡混合10秒。**孵育10 - 30分钟***

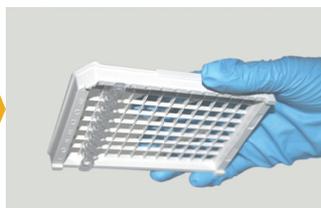

清空孔中的液体

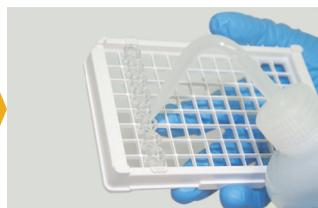


用洗涤缓冲液彻底洗孔5次



在吸水纸巾上用力拍打孔板



在每个孔中加入100ul 的偶联物溶液。在表面上轻轻摇晃10秒，混合。**孵育10 - 30分钟***

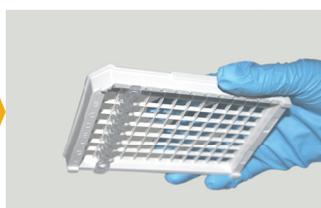

清空孔中的液体



用洗涤缓冲液彻底洗孔5次



在吸水纸巾上用力拍打孔板



在每个孔中加入100μL的底物溶液。在表面上轻轻摇晃10秒，混合。**孵育10 - 15分钟***



请勿清洗



在每个孔中加入100ul 的终止液。在表面上轻轻摇晃10秒，混合。



通过与标准品的颜色进行比较，用目测或使用微孔板阅读器读取结果。结果必须在30分钟内读取。

*** 孵育时间**，取决于目标过敏原蛋白质或残留物，详情请以说明书为准！

货号	英文名称	中文名称	规格
ESALMK-48	ELISA Systems Almond Drink Residue Test Kit	杏仁饮料残留检测试剂盒	48 tests/kit
ESARD-48	ELISA Systems Almond Residue Test Kit	杏仁残留检测试剂盒	48 tests/kit
ESMRDLG-48	ELISA Systems Beta-Lactoglobulin Residue Test Kit	β-乳球蛋白残留检测试剂盒	48 tests/kit
ESBWPRD-48	ELISA Systems Buckwheat Residue Test Kit	荞麦残留检测试剂盒	48 tests/kit
ESCASPRD-48	ELISA Systems Casein Residue Test Kit	酪蛋白残留检测试剂盒	48 tests/kit
ESCRUD-48	ELISA Systems Crustacean Residue Test Kit	甲壳类动物残留检测试剂盒	48 tests/kit
ESEGG-48	ELISA Systems Enhanced Egg Residue Test Kit	增强型鸡蛋残留检测试剂盒	48 tests/kit
ESEGGPR-48	ELISA Systems Processed Egg Residue Test Kit	加工过程, 鸡蛋残留检测试剂盒 (升级款)	48 tests/kit
ESGLUT-48	ELISA Systems Gluten Residue Test Kit	麸质残留检测试剂盒	48 tests/kit
ESGLT3-48	ELISA Systems Generation 3 Gluten Residue Detection Kit	第3代麸质残留检测试剂盒 (升级款)	48 tests/kit
ESHZMK-48	ELISA Systems Hazelnut Drink Residue Test Kit	榛子饮料残留检测试剂盒	48 tests/kit
ESHRD-48	ELISA Systems Hazelnut Residue Test Kit	榛子残留检测试剂盒	48 tests/kit
ESLUP-48	ELISA Systems Lupin Residue Test Kit	羽扇豆残留检测试剂盒	48 tests/kit
ESMUS-48	ELISA Systems Mustard Seed Residue Test Kit	芥菜籽残留检测试剂盒	48 tests/kit
ESOAT-48	ELISA Systems Oat Residue Test Kit	燕麦残留检测试剂盒	48 tests/kit
ESPRDS-48	ELISA Systems Peanut Residue (Sensitive) Test Kit	花生残留检测试剂盒	48 tests/kit
ESSESE-48	ELISA Systems Sesame Seed Protein Residue Test Kit	芝麻籽蛋白残留检测试剂盒	48 tests/kit
ESSMLK-48	ELISA Systems Soy Drink Residue Test Kit	大豆饮料残留检测试剂盒	48 tests/kit
ESSOYPRD-48	ELISA Systems Soy Residue Test Kit	豆残留检测试剂盒	48 tests/kit
ESTMLK-48	ELISA Total Milk Residue Test Kit	总牛奶检测试剂盒	48 tests/kit
ESADDSOL	ELISA Systems Enhanced Extraction Solution Concentrate	增强提取溶液浓缩物	25ml
ESSWB-10	ELISA Systems Food Allergen Swab Kit (pack of 10)	食品过敏原拭子试剂盒 (10 件装)	10 swabs



ELISA Systems中国区总代理:

www.amyjet.com
400-6800-868

